

Proctoscopio HB-SleeveLUX


Autoiluminado y
Desechable de
Diseño Patentado



De:
Haemoband
SURGICAL

El **proctoscopio HB-SleeveLUX** es un proctoscopio de un solo uso, autoiluminado y totalmente desechable para su uso en el diagnóstico y tratamiento de afecciones del canal anal y la parte inferior del recto.

Su exclusivo diseño patentado con **Tecnología Comfort Sleeve y de bloqueo** permite una mayor comodidad del paciente y una aplicación más sencilla y cómoda.

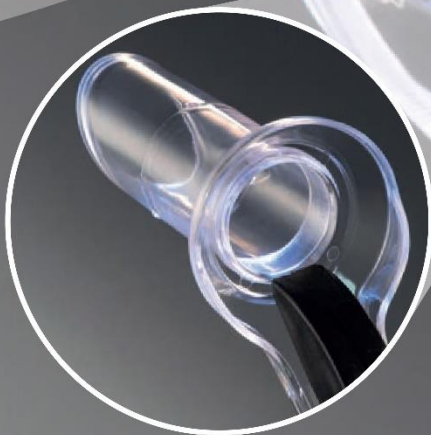



Listo para usar

Con una luz LED de alta intensidad totalmente integrada y alimentada por batería, el proctoscopio HB-SleeveLUX está listo para su uso en cuanto se retira de su envase. Al final del procedimiento, el módulo LED se separa fácilmente del cuerpo principal del dispositivo, lo que permite una eliminación fácil y segura de acuerdo con la mayoría de las normativas. locales.

Enfoque en el paciente

El exclusivo manguito Comfort Sleeve del proctoscopio HB-SleeveLUX se introduce en primer lugar utilizando el trocar y, a continuación, el tubo del proctoscopio se introduce a través del manguito utilizando el mango y con la ventaja de que el módulo de luz integrado proporciona una iluminación completa. Gracias al manguito protector, el proctoscopio puede seguir introduciéndose, girar libremente o retirarse por completo sin causar molestias al paciente. La tecnología patentada, el funcionamiento único del Comfort Sleeve y del proctoscopio, permite la retirada parcial o completa del proctoscopio, sin causar molestias al paciente.

Rápido y eficaz

La innovadora tecnología Comfort Sleeve proporciona al médico la flexibilidad necesaria para colocar el proctoscopio en cualquier ángulo. Esto hace que el procedimiento sea más cómodo para el paciente y más fácil para el médico.

Diseñado con un propósito

El tubo del proctoscopio HB-SleeveLUX tiene un diámetro intencionadamente mayor para facilitar procedimientos tales como la ligadura de hemorroides o la toma de biopsias.

El tubo de mayor diámetro no tiene un impacto negativo en el paciente gracias a la tecnología Comfort Sleeve.

¿Cómo funciona el manguito Comfort Sleeve y el mecanismo de bloqueo?

Al desarrollar el proctoscopio HB-SleeveLUX, nuestro principal objetivo era mejorar la comodidad del paciente y, al mismo tiempo, crear un instrumento de nueva generación que fuera más fácil de usar para los médicos.

La tecnología Comfort Sleeve y de bloqueo del proctoscopio HB-SleeveLUX resuelve este problema.

El manguito Comfort Sleeve (que se inserta con el trocar) protege eficazmente el tejido sensible que se encuentra por debajo de la línea dentada y permite insertar el proctoscopio HB-SleeveLUX varias veces y girarlo 360° sin que el paciente sufra ninguna molestia. El manguito Comfort Sleeve también actúa como barrera y punto de partida para la colocación de bandas para hemorroides o cualquier otro procedimiento.

Nuestra innovadora tecnología de bloqueo impide la extracción accidental del proctoscopio durante su uso, eliminando así molestias innecesarias al paciente. El mecanismo de bloqueo se activa alineando correctamente el tubo del cuerpo principal del proctoscopio con el manguito Comfort Sleeve insertado. Una vez que el proctoscopio se enrosca a través de la alineación correcta, tiene libertad para moverse radialmente, pero se inhibe de ser retirado por tres topes elevados integrales.

Especificaciones:

	Código	Longitud del cuerpo	Diámetro interior	Luz LED integrada
HB-SLEEVELUX 24	P2001	81 mm	24 mm	Sí
HB-SLEEVELUX 16	P2002	66 mm	16 mm	Sí



Haemoband Surgical Ltd.
The Mount Conference Centre
2 Woodstock Link
Belfast
BT6 8DD
Irlanda del Norte, Reino Unido

Tel.: +44 (0) 28 90737283
Correo electrónico: info@haemobandsurgical.com